

YOSHIDA



マウスピース洗浄器

# DENTAL CLEANER

デンタルクリーナー

Dr Mark's  
**HyGenie** 





「デンタルクリーナー」はナイトガードやマウスピースなどさまざまな歯科関連のアイテムをクリーニング可能。全体を一度に簡単ブラッシングできる形状に加え、細かなところもケアできるテーパー状のブラシは、どなたが使用しても一定のブラッシング効果を発揮。保管に便利なケース付きで洗面台周りも清潔。手に馴染みやすいエルゴノミックデザイン。



## 使用方法

### 1 開け方

カバー部を回転させて、ホールケース間にある「↑↓」と矢印が合わさった位置で、「カチッ」とロックが外れる音がしたら、ケースからカバーを取り外してください。

### 2 装着

図のようにナイトガードやマウスピースなどを1つまたは2つセットします。(対応幅<65mm)



### 3 閉め方

ホールケース間にある「↑↓」と、1で取り外した赤または黒カバーにある「↑↓」が図のように重なるように合わせてください。その後、軽く回転するとカバーはロックされます。

### 4 洗う

ホールケース内に、ある程度均一に広がるように、ジェルタイプの歯磨き剤を2～3滴たらし、軽く水を加えます。

### 5 磨く

赤と黒カバー部分をしっかり持ち、左右逆回転(45度ぐらいの回転)させてください。30～45秒を目安に磨きます。

### 6 すすぐ

ホールケースに水をしっかり入れながら、同様に左右逆回転して、すすいでください。泡がなくなったら、1と同様に開けてください。

### 7 装着、保管、携帯

もし、泡が残っていたら、開けた状態で軽くすすいでください。その後、口腔内に装着してご使用ください。使用しない場合は、カバーを閉じて保管してください。デンタルクリーナーのケースは衝撃にも強いので、安全に保管や携帯ができます。

## メンテナンスと交換

メンテナンスは、何も設置していない状態で、月に一回ほど洗浄剤や歯磨き剤などを上記同様の手順で流し込み、軽く回転させてすすぎます。ブラシは半年に1回のペースで、デンタルクリーナー交換用ブラシと交換してください。交換方法は、ブラシをしっかりと掴み本体から剥がした後、それぞれのカバーにある「↑」と新しいブラシの「▲」の位置が合わさるように、差し込むだけの簡単な作業です。

### マウスガード洗浄器 デンタルクリーナー

保管に便利な  
ケース付




本体サイズ：φ90×85mm  
標準価格：4,290円(税込)  
患者参考価格：5,390円(税込)



### デンタルクリーナー 交換用ブラシ (2個入)

半年に1回の  
ペースで交換

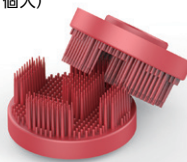

本体サイズ：φ75×40mm  
標準価格：1,375円(税込)  
患者参考価格：2,035円(税込)

### マウスガード携帯ケース デンタル携帯用ケース

マウスピースの  
持ち運びに便利な  
携帯用ケース



本体サイズ：83×88×33mm  
標準価格：1,485円(税込)  
患者参考価格：2,145円(税込)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2021年4月現在。

禁無断転載

輸入元：株式会社吉田製作所

販売元：株式会社 **ヨシタ** 東京都台東区上野 7-6-9

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシタ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 ± 9:00～17:00  
(日曜・祝祭日を除く)

●お問い合わせは下記まで



(01)02747937018712

C02300/2021年4月/30/@20/新